

# Phonak Naída™ V

(V90/V70/V50/V30)

Οδηγίες Χρήσης



**PHONAK**  
life is on

---

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

### **Ασύρματα μοντέλα**

Phonak Naída V90-RIC

Phonak Naída V90-SP

Phonak Naída V90-UP

Phonak Naída V70-RIC

Phonak Naída V70-SP

Phonak Naída V70-UP

Phonak Naída V50-RIC

Phonak Naída V50-SP

Phonak Naída V50-UP

Phonak Naída V30-RIC

Phonak Naída V30-SP

Phonak Naída V30-UP

### **Επικόλληση σήματος CE**

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016



# Λεπτομέρειες για το ακουστικό βαρηκοΐας σας

❶ Αν δεν είναι επιλεγμένο κανένα πλαίσιο και δεν γνωρίζετε το μοντέλο του ακουστικού βαρηκοΐας σας, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

## Μοντέλο

## Τύπος μπαταρίας

- |  |     |
|--|-----|
| <input type="checkbox"/> Naída V-RIC (V90/V70/V50/V30) | 13  |
| <input type="checkbox"/> Naída V-SP (V90/V70/V50/V30)  | 13  |
| <input type="checkbox"/> Naída V-UP (V90/V70/V50/V30)  | 675 |

## Εξάρτημα για το αυτί

- Θηλή
- SlimTip
- cShell
- Κλασικό εκμαγείο

Ο ακοοπροθετιστής σας:

┌

└

└

┌

Τα ακουστικά βαρηκοΐας σας έχουν δημιουργηθεί από τη Phonak, τον παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις για προβλήματα ακοής με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Αυτά τα προϊόντα υψηλής ποιότητας είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών έρευνας και εξειδίκευσης και είναι σχεδιασμένα ώστε να σας κρατούν συνδεδεμένους με την ομορφιά του ήχου! Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική επιλογή σας και σας ευχόμαστε πολλά χρόνια ακουστικής απόλαυσης.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αξιοποιείτε στο έπακρο τα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα, απλώς επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Phonak – life is on  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

### **Λήψη της εφαρμογής Phonak Support**

Για να έχετε έναν ατομικό και διαδραστικό οδηγό χρήσης πάντα μαζί σας, κάντε λήψη της εφαρμογής Phonak Support στην κινητή συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

**[www.phonak.com/supportapp](http://www.phonak.com/supportapp)**



---

# Πίνακας περιεχομένων

## **Το ακουστικό βαρηκοΐας σας**

1. Συνοπτικός οδηγός 6
2. Τα μέρη του ακουστικού βαρηκοΐας 8

## **Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας**

3. Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας 10
4. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 11
5. Μπαταρίες 12
6. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας στο αυτί 14
7. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας 16
8. Κουμπί πίεσης 18
9. Ρυθμιστής έντασης ήχου 19
10. Τεχνολογία Roger για συνομιλία εν μέσω θορύβου και από απόσταση 20
11. Χρήση δεκτών Roger 22

## **Περαιτέρω πληροφορίες**

12. Ελάτε στην κοινότητά μας για άτομα με απώλεια ακοής! 27
13. Μια λύση πέρα από το ακουστικό βαρηκοΐας σας 28
14. Φροντίδα και συντήρηση 31
15. Επισκευή και εγγύηση 34
16. Πληροφορίες συμμόρφωσης 36
17. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων 40
18. Αντιμετώπιση προβλημάτων 44
19. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια 46

# 1. Συνοπτικός οδηγός


## Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας



Μπλε ένδειξη για το **αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας**.


Κόκκινη ένδειξη για το **δεξί ακουστικό βαρηκοΐας**.

## Αλλαγή μπαταριών

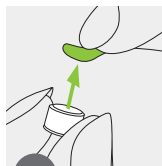


1

Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από τη νέα μπαταρία και περιμένετε για δύο λεπτά.

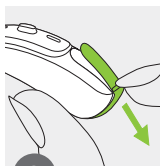

2


Ανοίξτε την μπαταριοθήκη.

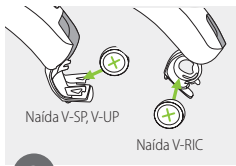


3

Τοποθετήστε την μπαταρία στην μπαταριοθήκη, με το σύμβολο «+» στραμμένο προς τα επάνω.

## Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

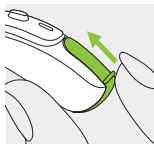


Ενεργοποίηση

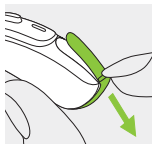


Απενεργοποίηση

## Κουμπί πίεσης

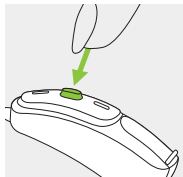

Το κουμπί προγραμμάτων στο ακουστικό βαρηκοΐας σας μπορεί να έχει διάφορες λειτουργίες.

## Ρυθμιστής έντασης ήχου

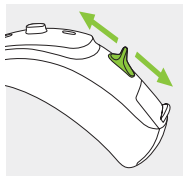


Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα επάνω. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα κάτω.

## 2. Τα μέρη του ακουστικού βαρηκοΐας

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα μοντέλα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Μπορείτε να ταυτοποιήσετε το δικό σας μοντέλο:

- ανατρέχοντας στην παράγραφο «Λεπτομέρειες για το ακουστικό βαρηκοΐας σας», στη σελίδα 3,
- ή αντιπαραβάλλοντας το ακουστικό βαρηκοΐας σας με τα μοντέλα που απεικονίζονται παρακάτω. Παρατηρήστε προσεκτικά το σχήμα του ακουστικού βαρηκοΐας και αν η συσκευή διαθέτει ρυθμιστή έντασης ήχου.


### Πιθανά εξαρτήματα για το αυτί για διαφορετικά μοντέλα

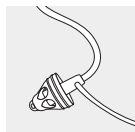

Θηλή  
Naída V-RIC



SlimTip  
Naída V-RIC

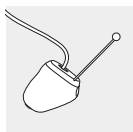

cShell  
Naída V-RIC




Κλασικό εκμαγείο  
Naída V-SP/UP



## Ναίδα V-RIC




## Ναίδα V-SP και V-UP

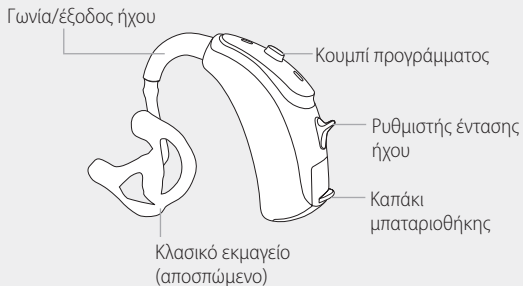

---

### 3. Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας

Υπάρχει μια κόκκινη ή μπλε ένδειξη που υποδεικνύει αν το ακουστικό βαρηκοΐας προορίζεται για το αριστερό ή για το δεξί αυτί.

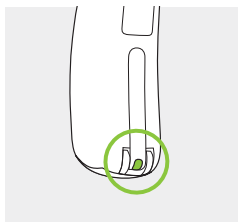


Μπλε ένδειξη για το **αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας**.  
Κόκκινη ένδειξη για το **δεξί ακουστικό βαρηκοΐας**.

## 4. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Το καπάκι της μπαταριοθήκης είναι επίσης ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.


1

Κλειστό καπάκι μπαταριοθήκης =  
ακουστικό βαρηκοΐας  
**ενεργοποιημένο**

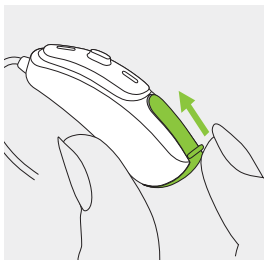


2

Ανοιχτό καπάκι μπαταριοθήκης =  
ακουστικό βαρηκοΐας  
**απενεργοποιημένο**

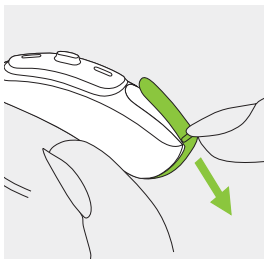


ⓘ Κατά την ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας σας μπορεί να ακούσετε μια μελωδία έναρξης.

## 5. Μπαταρίες

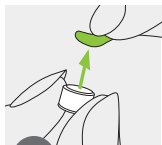


1

Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από τη νέα μπαταρία και περιμένετε για δύο λεπτά.

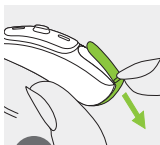

2

Ανοίξτε την μπαταριοθήκη.

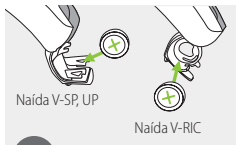

3

Τοποθετήστε την μπαταρία στην μπαταριοθήκη, με το σύμβολο «+» στραμμένο προς τα επάνω.

- i** Αν δυσκολεύεστε να κλείσετε το καπάκι της μπαταριοθήκης: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι το σύμβολο «+» είναι στραμμένο προς τα επάνω. Αν η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, το ακουστικό βαρηκοΐας δεν θα λειτουργεί και το καπάκι της μπαταριοθήκης μπορεί να υποστεί ζημιά.



Χαμηλή ισχύς μπαταρίας: Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, ακούγονται δύο χαρακτηριστικοί ήχοι («μπιπ»). Θα έχετε χρονικό περιθώριο περίπου 30 λεπτών για να φορτίσετε την μπαταρία (το χρονικό περιθώριο μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του ακουστικού βαρηκοΐας και την μπαταρία). Συνιστούμε να έχετε πάντα μαζί σας μια εφεδρική μπαταρία.

### Ανταλλακτική μπαταρία

Αυτό το ακουστικό βαρηκοΐας λειτουργεί με μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρα. Προσδιορίστε το σωστό μέγεθος μπαταρίας (13 ή 675):

- ανατρέχοντας στην παράγραφο «Λεπτομέρειες για το ακουστικό βαρηκοΐας σας», στη σελίδα 3,
- ελέγχοντας την ένδειξη στην εσωτερική πλευρά του καπακιού της μπαταριοθήκης,
- ελέγχοντας τον παρακάτω πίνακα.

Μοντέλο	Μέγεθος μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρα	Χρωματική ένδειξη στη συσκευασία	Κωδικός IEC	Κωδικός ANSI
Phonak Naída V-RIC, V-SP	13	πορτοκαλί	PR48	7000ZD
V-UP	675	μπλε	PR44	7003ZD


**i** Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο μπαταρίας στα ακουστικά βαρηκοΐας σας (ψευδαργύρου-αέρα). Διαβάστε επίσης το κεφάλαιο 19.2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος.

## 6. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας στο αυτί

### 6.1 Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας με κλασικό εκμαγείο


1

Φέρετε το εκμαγείο στο αυτί σας και τοποθετήστε το μέρος του ακουστικού πόρου στο εσωτερικό του ακουστικού σας πόρου.

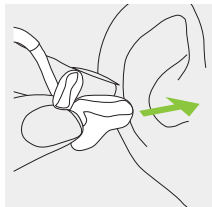


2

Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί σας.

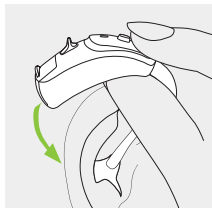

3


Εισαγάγετε το άνω τμήμα του εκμαγείου στο άνω τμήμα της κοιλότητας του αυτιού σας.

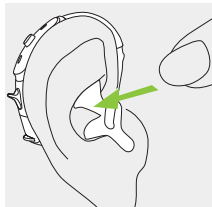

## 6.2 Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας με θηλή, SlimTip ή cShell


1

Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί σας.

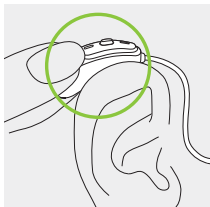


2

Εισαγάγετε το εξάρτημα για το αυτί στον ακουστικό πόρο σας.

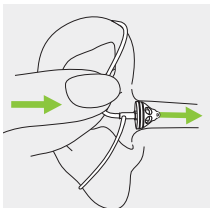

3

Αν το εξάρτημα για το αυτί είναι συνδεδεμένο με στοιχείο αγκύρωσης, τοποθετήστε το μέσα στην κοιλότητα του αυτιού σας για να στερεώσετε με ασφάλεια το ακουστικό βαρηκοΐας σας.

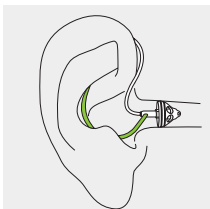


## 7. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας

### 7.1 Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας με κλασικό εκμαγείο


1

Ανασηκώστε το ακουστικό βαρηκοΐας πάνω από το άνω τμήμα του αυτιού σας.

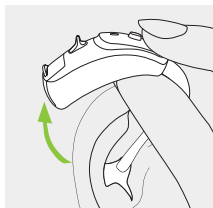

2

Πιάστε το εκμαγείο με τα δάκτυλά σας και αφαιρέστε το προσεκτικά.

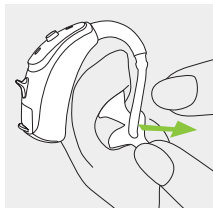


**(i)** Αποφύγετε να πιάνετε το σωληνάκι για να αφαιρέσετε το ακουστικό βαρηκοΐας.



## 7.2 Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας με θηλή, SlimTip ή cShell

1


Τραβήξτε προσεκτικά το κυρτό τμήμα του σωλήνα και αφαιρέστε το ακουστικό βαρηκοΐας από το πίσω μέρος του αυτιού.

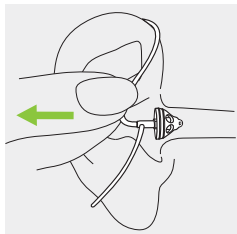

**⚠** Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, το εξάρτημα για το αυτί μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας από το αυτί. Στην απίθανη περίπτωση ενσφήνωσης του εξαρτήματος για το αυτί στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ειδικό ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή του.

## 8. Κουμπί προγραμμάτων


Το κουμπί πίεσης στο ακουστικό βαρηκοΐας σας μπορεί να έχει διάφορες λειτουργίες ή να είναι ανενεργό. Αυτό εξαρτάται από τον προγραμματισμό που έχει γίνει στο ακουστικό βαρηκοΐας σας, ο οποίος υποδεικνύεται στις εξατομικευμένες «Οδηγίες ακουστικού βαρηκοΐας» για τη συσκευή σας. Για να προμηθευτείτε αυτό το έντυπο, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

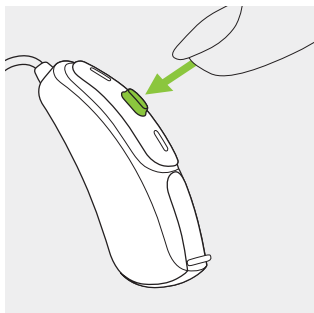

## 9. Ρυθμιστής έντασης ήχου

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα επάνω. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα κάτω.

Ο ρυθμιστής έντασης ήχου μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον ακοοπροθετιστή.

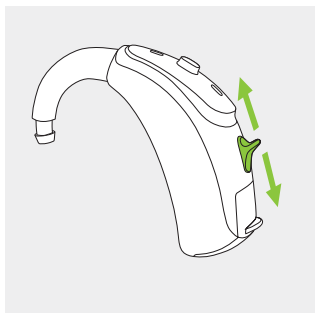

---


## 10. Τεχνολογία Roger για συνομιλία εν μέσω θορύβου και από απόσταση

Βρίσκεστε συχνά σε καταστάσεις στις οποίες το επίπεδο θορύβου είναι υψηλό ή η απόσταση από τον ομιλητή είναι μεγαλύτερη από 1,5 m (5 πόδια); Για παράδειγμα σε

- θορυβώδη εστιατόρια, καφετέριες και μπαρ
- οικογενειακές συγκεντρώσεις
- επαγγελματικές συναντήσεις, παρουσιάσεις και διαλέξεις με έναν ή περισσότερους ομιλητές
- συνομιλίες δύο ατόμων
- κλήσεις μέσω κινητού τηλεφώνου
- παρακολούθηση τηλεόρασης και ακρόαση μουσικής
- στο αυτοκίνητο
- διαδικτυακές βιντεοκλήσεις

Ο συνδυασμός των ακουστικών βαρηκοΐας Phonak Naída V με ένα ασύρματο μικρόφωνο Roger σας επιτρέπει να ακούτε και να κατανοείτε μεγαλύτερο ποσοστό ομιλίας υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

[www.phonak.com/roger](http://www.phonak.com/roger)

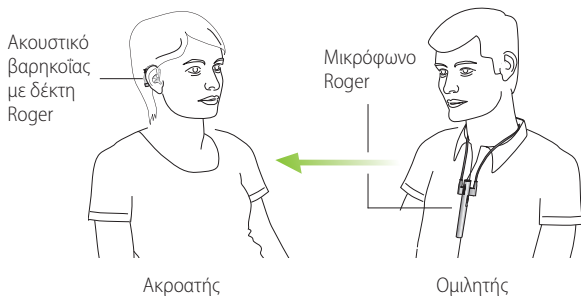

Το μικρόφωνο Roger μεταδίδει τη φωνή του ομιλητή απευθείας στα αυτιά σας. Το σύστημα αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: τα ακουστικά βαρηκοΐας σας, δέκτες Roger και το μικρόφωνο Roger.

Ζητήστε από τον ακοοπροθετιστή σας μια επίδειξη της τεχνολογίας Roger και περισσότερες πληροφορίες.

# 11. Χρήση δεκτών Roger

## 11.1 Δέκτες Roger ενσωματωμένοι βάσει σχεδιασμού

Τα ακουστικά βαρηκοΐας σας Phonak Naída V μπορούν να εξοπλιστούν με ενσωματωμένους βάσει σχεδιασμού δέκτες Roger.

Με προσαρτημένο τον ενσωματωμένο βάσει σχεδιασμού δέκτη, το ακουστικό βαρηκοΐας παρέχει όλες τις λειτουργίες και χρήσεις που παρέχονται και χωρίς το δέκτη. Το ακουστικό βαρηκοΐας με τον ενσωματωμένο βάσει σχεδιασμού δέκτη είναι ανθεκτικό στο νερό. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 14.



**⚠** Ο ακοοπροθετιστής έχει ήδη προετοιμάσει το ακουστικό βαρηκοΐας σας για χρήση με την τεχνολογία Roger. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

## 11.2 Διάταξη υποδοχής ήχου και δέκτης Roger X




Με τη διάταξη υποδοχής ήχου και το δέκτη Roger X συνδεδεμένο, το ακουστικό βαρηκοΐας παρέχει τις ίδιες λειτουργίες και χρηστικότητα όπως και χωρίς το δέκτη, με μία σημαντική διαφορά:

**⚠** Το ακουστικό βαρηκοΐας σας με τη διάταξη υποδοχής ήχου δεν είναι πλέον ανθεκτικό στο νερό.

## Προσάρτηση της διάταξης υποδοχής ήχου


1

Πιέστε τη διάταξη υποδοχής ήχου προς τη βάση του ακουστικού βαρηκοΐας. Αντιστοιχίστε τις εγκοπές που υπάρχουν στα δύο μέρη.

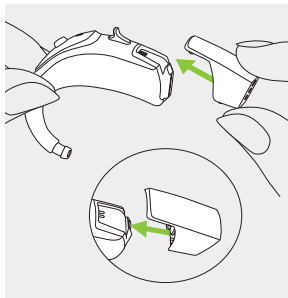

2

Πιέστε έως ότου κουμπώσει στη θέση του και προσαρτηθεί σωστά στο ακουστικό βαρηκοΐας. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να προσαρτησετε το δέκτη Roger X.

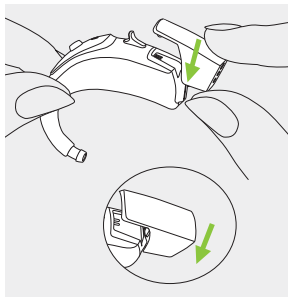




## Προσάρτηση του δέκτη Roger X

1

Πιέστε τις τρεις ακίδες του δέκτη Roger X στις τρεις οπές της διάταξης υποδοχής ήχου. Ο δέκτης Roger X είναι σωστά προσαρτημένος όταν ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.

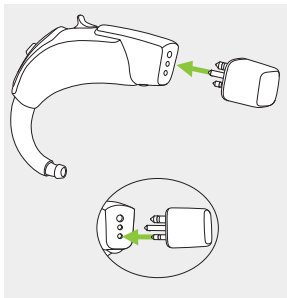


Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του συγκεκριμένου δέκτη.

**⚠** Για να ακούτε αμέσως το σήμα του μικροφώνου Roger όταν απαιτείται, η Phonak συνιστά να αφήνετε το δέκτη Roger X προσαρτημένο στο ακουστικό βαρηκοΐας όταν δεν χρησιμοποιείται.

## Αφαίρεση της διάταξης υποδοχής ήχου


1

Κρατήστε τον ακουστικό βαρηκοΐας ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη. Μετακινήστε προς τα πίσω το σύστημα ασφάλισης της διάταξης υποδοχής ήχου.

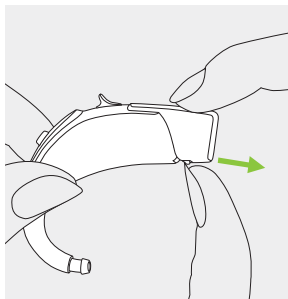

2

Τραβήξτε τη διάταξη υποδοχής ήχου προς τα επάνω με το άλλο χέρι. Η διάταξη υποδοχής ήχου έχει πλέον αφαιρεθεί από το ακουστικό βαρηκοΐας.

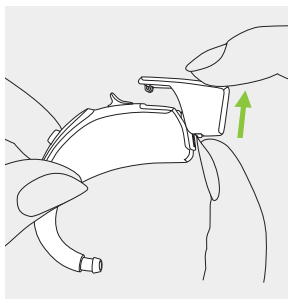

---

## 12. Ελάτε στην κοινότητά μας για άτομα με απώλεια ακοής!

Στον ιστότοπο [HearingLikeMe.com](http://HearingLikeMe.com) θα βρείτε:

- **Η ζωή με απώλεια ακοής**

Μια συλλογή από ενδιαφέροντα άρθρα για τη ζωή με απώλεια ακοής.

- **Φόρουμ**

Ένα φόρουμ όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες.

- **Ιστολόγιο**

Ένα ιστολόγιο για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα σε όλα τα θέματα που αφορούν την ακοή.

***HearingLikeMe***  
.com

---

## 13. Μια λύση πέρα από το ακουστικό βαρηκοΐας σας

Καθώς η απώλεια ακοής σας επιδεινώνεται, ένα ακουστικό βαρηκοΐας μπορεί να μην είναι πλέον η κατάλληλη λύση για εσάς. Αν δυσκολεύεστε να κατανοήσετε ομιλία ή να μιλήσετε στο τηλέφωνο, ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε το ενδεχόμενο ενός κοχλιακού εμφυτεύματος Advanced Bionics (AB) για το επόμενο βήμα του ταξιδιού σας προς την ακοή. Με τη σημερινή πρόοδο στην τεχνολογία της ακοής, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων με σημαντική απώλεια ακοής απολαμβάνουν την αποκατάσταση της ακοής τους με κοχλιακά εμφυτεύματα. Αυτή η προηγμένη λύση για προβλήματα ακοής είναι σχεδιασμένη ώστε να σας βοηθήσει να ανακτήσετε τους ήχους και τις χαρές της ζωής που μπορεί να χάνετε λόγω της απώλειας ακοής σας.

Ένα σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία. Το εξωτερικό στοιχείο είναι ένας επεξεργαστής ήχου που τοποθετείται στο εξωτερικό μέρος του αυτιού ή σε ένα διακριτικό σημείο του σώματος. Το εσωτερικό στοιχείο είναι το εμφύτευμα, το οποίο παρέχει ήχο στο ακουστικό νεύρο. Αντίθετα με τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα κοχλιακά εμφυτεύματα παρακάμπτουν το κατεστραμμένο μέρος του αυτιού και στέλνουν ηλεκτρικά σήματα απευθείας

στον εγκέφαλο μέσω του ακουστικού νεύρου. Η ακοή με κοχλιακά εμφυτεύματα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούτε τους ήχους που πραγματικά ομορφαίνουν τη ζωή – τα όμορφα τραγούδια της φύσης, το γέλιο μαζί με φίλους, τις πολλές διαστάσεις της μουσικής και πολλά ακόμη.

Η AB και η Phonak ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών και συνεργάζονται για να βοηθήσουν τα άτομα με σημαντική απώλεια ακοής. Ο επεξεργαστής ήχου Naída CI από την Advanced Bionics προσφέρει μοναδικά, καινοτόμα χαρακτηριστικά που βοηθούν τους χρήστες να ακούν καλύτερα σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα της μοναδικής σχέσης μεταξύ της AB και της Phonak, ο επεξεργαστής ήχου Naída CI προσφέρει μερικά από τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα με τα ακουστικά βαρηκοΐας Naída. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τεχνολογία σχεδιασμένη για βελτιωμένη κατανόηση ομιλίας και άνεση ακρόασης σε διάφορες συνθήκες. Αν διαθέτετε ένα σύστημα Roger για καλύτερη κατανόηση εν μέσω θορύβου και από απόσταση, για να απολαμβάνετε μουσική, τηλεόραση και χρήση κινητού τηλεφώνου, μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε με το κοχλιακό εμφύτευμα Advanced Bionics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Naída CI και την τεχνολογία κοχλιακού εμφυτεύματος AB, επισκεφτείτε τον ιστότοπο **AdvancedBionics.com**



---

## 14. Φροντίδα και συντήρηση

Η προσεκτική και τακτική φροντίδα του ακουστικού βαρηκοΐας σας συμβάλλει στην υψηλή απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες ως κατευθυντήριες οδηγίες. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 19.2.

### **Γενικές πληροφορίες**

Πριν από τη χρήση σπρί για τα μαλλιά ή καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να αφαιρείτε το ακουστικό βαρηκοΐας από το αυτί σας, καθώς τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο ακουστικό.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, αφήνετε το καπάκι της μπαταριοθήκης ανοικτό, ώστε να εξατμίζεται τυχόν υγρασία. Πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας σε ασφαλές, στεγνό και καθαρό μέρος.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ανθεκτικά στο νερό, τον ιδρώτα και τη σκόνη, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Το καπάκι της μπαταριοθήκης είναι τελείως κλειστό. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σφηνώσει ξένα σώματα, όπως τρίχες, στο καπάκι της μπαταριοθήκης κατά το κλείσιμό του.
- Μετά από έκθεση σε νερό, ιδρώτα ή σκόνη, το ακουστικό βαρηκοΐας πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται.
- Το ακουστικό βαρηκοΐας πρέπει να χρησιμοποιείται και να συντηρείται όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

- ❶ Τα ακουστικά βαρηκοΐας με ενσωματωμένο βάσει σχεδιασμού δέκτη Roger είναι επίσης ανθεκτικά στο νερό.
- ❶ Τα ακουστικά βαρηκοΐας με διάταξη υποδοχής ήχου και δέκτη Roger X δεν είναι ανθεκτικά στο νερό.
- ❶ Σε περίπτωση χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας κοντά σε νερό ενδέχεται να περιοριστεί η ροή αέρα στις μπαταρίες, με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία του. Αν το ακουστικό βαρηκοΐας πάψει να λειτουργεί μετά από επαφή με νερό, ανατρέξτε στα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, στο κεφάλαιο 18.



## **Καθημερινά**

Ελέγχετε αν υπάρχουν εναποθέσεις κυψελίδας αυτιού και υγρασίας στο ακουστικό και στο σωληνάκι. Καθαρίζετε τις επιφάνειες με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι ή χρησιμοποιείτε τη μικρή βούρτσα που περιέχει η σκληρή θήκη του ακουστικού βαρηκοΐας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι, κ.λπ., για τον καθαρισμό του ακουστικού βαρηκοΐας σας. Το ξέπλυμα των εξαρτημάτων αυτών με νερό δεν συνιστάται, καθώς υπάρχει κίνδυνος παραμονής του στο σωληνάκι. Αν απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός του ακουστικού βαρηκοΐας σας, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα ή τις κάψουλες αφύγρανσης.

## **Εβδομαδιαία**

Καθαρίζετε το εξάρτημα για το αυτί με ένα μαλακό, υγρό πανί ή με ειδικό πανί καθαρισμού για ακουστικά βαρηκοΐας. Για περισσότερες οδηγίες συντήρησης ή καθαρισμού, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας.

## **Μηνιαία**

Ελέγχετε αν το ακουστικό σωληνάκι έχει αποχρωματιστεί, σκληρύνει ή ραγίσει. Αν διαπιστωθούν μεταβολές αυτού του τύπου, το ακουστικό σωληνάκι πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

---

## 15. Επίσκεψη και εγγύηση

### **Τοπική εγγύηση**

Για τους όρους της τοπικής εγγύησης, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή από τον οποίο προμηθευτήκατε το ακουστικό βαρηκοΐας σας.

### **Διεθνής εγγύηση**

Η Rhonak παρέχει περιορισμένη διεθνή εγγύηση ενός έτους, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς.

Η συγκεκριμένη περιορισμένη εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττωματικά υλικά στο ίδιο το ακουστικό, αλλά όχι σε αξεσουάρ, όπως μπαταρίες, σωληνάκια, εκμαγεία και εξωτερικοί δέκτες. Η εγγύηση ισχύει μόνο κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

## Περιορισμοί εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή φροντίδας, έκθεσης σε χημικές ουσίες ή υπερβολικής καταπόνησης. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση βλάβης που έχει προκληθεί από τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η εγγύηση αυτή δεν περιλαμβάνει τυχόν επισκευές που εκτελούνται από τον ακοοπροθετιστή στο χώρο εργασίας του.

Σειριακός αριθμός  
(αριστερή πλευρά):

Εξουσιοδοτημένος  
ακοοπροθετιστής (σφραγίδα/  
υπογραφή):

---

Σειριακός αριθμός  
(δεξιά πλευρά):

---

Ημερομηνία αγοράς:

---

---

## 16. Πληροφορίες συμμόρφωσης

### Ευρώπη:

#### Δήλωση συμμόρφωσης

Η Phonak AG δηλώνει διά του παρόντος ότι το συγκεκριμένο προϊόν της Phonak πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Phonak, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται σε λίστα στον ιστότοπο [www.phonak.com](http://www.phonak.com) (Phonak worldwide locations - Αντιπροσωπείες της Phonak σε ολόκληρο τον κόσμο).

### Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία:



**R-NZ**

Υποδεικνύει τη συμμόρφωση μιας συσκευής με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις των φορέων Radio Spectrum Management (RSM - Διαχείριση ραδιοφάσματος) της Νέας Ζηλανδίας και Australian Communications and Media Authority (ACMA - Αυστραλιανή αρχή επικοινωνιών και μέσων) της Αυστραλίας σχετικά με τη νόμιμη πώληση στις εν λόγω χώρες.

Η ετικέτα συμμόρφωσης R-NZ προορίζεται για ραδιοπροϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της Νέας Ζηλανδίας υπό το επίπεδο συμμόρφωσης A1.

Τα ασύρματα μοντέλα που αναφέρονται στη σελίδα 2 είναι πιστοποιημένα βάσει των παρακάτω:

#### **Phonak Naída V-SP (V90/V70/V50/V30)**

---

ΗΠΑ  
Καναδάς

**Αρ. αναγνώρισης FCC:** KWC-BTEVSP  
**IC:** 2262A-BTEVSP

#### **Phonak Naída V-UP (V90/V70/V50/V30)**

---

ΗΠΑ  
Καναδάς

**Αρ. αναγνώρισης FCC:** KWC-BTEVUP  
**IC:** 2262A-BTEVUP

#### **Phonak Naída V-RIC (V90/V70/V50/V30)**

---

ΗΠΑ  
Καναδάς

**Αρ. αναγνώρισης FCC:** KWC-WHSRIC4  
**IC:** 2262A-WHSRIC4

### **Σημείωση 1:**

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο RSS-210 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία της υπόκειται στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

- 1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- 2) η συσκευή αυτή πρέπει να μπορεί να δεχθεί τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεμβολών που προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

### **Σημείωση 2:**

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στην παρούσα συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Phonak μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της άδειας χειρισμού της συσκευής αυτής βάσει των κανονισμών FCC.

### **Σημείωση 3:**

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο ICES-003 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά.

Τα όρια αυτά προορίζονται για την παροχή εύλογης προστασίας από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση της δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν η συσκευή αυτή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για υποστήριξη.

---

## 17. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων

---



Με το σύμβολο CE, η Phonak AG επιβεβαιώνει ότι το παρόν προϊόν της Phonak –συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων– πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (PTTE). Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο των παραπάνω οδηγιών.

---



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις για εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β του προτύπου EN 60601-1. Η επιφάνεια του ακουστικού βαρηκοΐας χαρακτηρίζεται ως εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β.

---



Υποδεικνύει τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, όπως ορίζεται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

---





Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

---



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

---



Σημαντικές πληροφορίες για το χειρισμό και την ασφάλεια του προϊόντος.

---



Κατά τη διάρκεια μεταφοράς, διατηρείτε το προϊόν στεγνό.

---

---

**Συνθήκες  
λειτουργίας**

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τρόπο, ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς, όταν χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Τα ακουστικά βαρηκοΐας έχουν ταξινομηθεί ως IP68 (βάθος 1 μέτρου για 60 λεπτά) και σχεδιαστεί για χρήση σε όλες τις καθημερινές καταστάσεις της ζωής. Επομένως, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν τα ακουστικά βαρηκοΐας σας εκτεθούν σε ψιλόβροχο ή ιδρώτα. Ωστόσο, το ακουστικό βαρηκοΐας δεν ενδείκνυται για χρήση σε δραστηριότητες με νερό που περιλαμβάνουν χλωριωμένο νερό, σαπούνι, αλμυρό νερό ή άλλα υγρά με χημικό περιεχόμενο.

---

**SN**

Υποδεικνύει το σειριακό αριθμό του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μιας συγκεκριμένης ιατρικής συσκευής.

---

**REF**

Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μιας συγκεκριμένης ιατρικής συσκευής.

---



Θερμοκρασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση:  
-20° έως +60° Κελσίου (-4° έως +140° Φαρενάιτ).

---



Υγρασία κατά τη μεταφορά: Έως 90% (χωρίς συμπύκνωση).

Υγρασία κατά την αποθήκευση: 0% έως 70%,  
εφόσον δεν χρησιμοποιείται. Για οδηγίες σχετικά  
με την αφύγρανση του ακουστικού βαρηκοΐας  
μετά τη χρήση, βλ. οδηγίες στο κεφάλαιο 19.2.

---



Ατμοσφαιρική πίεση: 200 hPA έως 1500 hPA

---



Το σύμβολο με το διαγεγραμμένο κάδο  
απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτό το ακουστικό  
βαρηκοΐας δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα κοινά  
οικιακά απόβλητα. Τα παλιά ή τα μη χρησιμοποιημένα  
ακουστικά βαρηκοΐας πρέπει να απορρίπτονται σε  
χώρους διάθεσης ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να  
παραδίδονται στον ακοοπροθετιστή για απόρριψη.  
Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του  
περιβάλλοντος και της υγείας.

---

## 18. Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Πρόβλημα

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν λειτουργεί

Ακούγονται συριγμοί από το ακουστικό βαρηκοΐας

Η ένταση ήχου του ακουστικού βαρηκοΐας δεν είναι αρκετά υψηλή ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος

Το ακουστικό βαρηκοΐας εκπέμπει δύο χαρακτηριστικούς ήχους

Το ακουστικό βαρηκοΐας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται (μη συνεχής λειτουργία)

### Αιτίες

Εξαντλημένη μπαταρία

Μπλοκαρισμένο ηχείο/εξάρτημα για το αυτί

Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά

Απενεργοποιημένο ακουστικό βαρηκοΐας

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά

Υπολείμματα κυψελίδας αυτιού στον ακουστικό πόρο

Υπερβολικά υψηλή ένταση ήχου

Χαμηλή ισχύς μπαταρίας

Μπλοκαρισμένο ηχείο/εξάρτημα για το αυτί

Υπερβολικά χαμηλή ένταση ήχου

Μεταβολή της φυσικής κατάστασης της ακοής

Ένδειξη για χαμηλή ισχύ μπαταρίας

Υγρασία στην μπαταρία ή στο ακουστικό βαρηκοΐας

**i** Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπρωθετιστή σας για βοήθεια.

## **Τι να κάνετε**

---

Αλλάξτε μπαταρία (κεφάλαια 1 + 5)

---

Καθαρίστε το άνοιγμα του ηχείου/εξάρτημα για το αυτί

---

Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία (κεφάλαια 1 + 5)

---

Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας κλείνοντας εντελώς το καπάκι της μπαταριοθήκης (κεφάλαιο 4)

---

Τοποθετήστε σωστά το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 6)

---

Επικοινωνήστε με τον ωτορινολαρυγγολόγο/γενικό ιατρό ή τον ακοοπροθετιστή σας

---

Μειώστε την ένταση του ήχου (κεφάλαια 8 + 9)

---

Αλλάξτε μπαταρία (κεφάλαια 1 + 5)

---

Καθαρίστε το άνοιγμα του ηχείου/εξάρτημα για το αυτί

---

Αυξήστε την ένταση του ήχου, αν η συσκευή διαθέτει ρυθμιστή έντασης ήχου (κεφάλαια 8 + 9)

---

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας

---

Αλλάξτε μπαταρία εντός των επόμενων 30 λεπτών (κεφάλαια 1 + 5)

---

Σκουπίστε την μπαταρία και το ακουστικό βαρηκοΐας με ένα στεγνό πανί

---


---

## 19. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια


Διαβάστε τις πληροφορίες στις παρακάτω σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας.

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν αποκαθιστά τη φυσιολογική ακοή και δεν αποτρέπει ούτε βελτιώνει διαταραχές της ακοής που οφείλονται σε οργανικές παθήσεις. Σε περίπτωση μη τακτικής χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας, ο χρήστης δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Η χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας αποτελεί μόνο ένα μέρος της διαδικασίας επαναφοράς της ακοής και ενδέχεται να πρέπει να συμπληρωθεί από ακουστική εκπαίδευση και εξάσκηση στη χειλεανάγνωση.


## 19.1 Προειδοποιήσεις κινδύνου


 Τα ακουστικά βαρηκοΐας προορίζονται για ενίσχυση και μετάδοση ήχου στα αυτιά, σε περιπτώσεις όπου η ακοή είναι περιορισμένη.


Τα ακουστικά βαρηκοΐας (προγραμματισμένα ειδικά για κάθε τύπο απώλειας ακοής) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από το άτομο για το οποίο προορίζονται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε άλλο άτομο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.


 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στο ακουστικό βαρηκοΐας αλλαγές ή τροποποιήσεις, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Phonak. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες


στο αυτί ή στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.

 Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης (ορυχεία ή βιομηχανικές περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, περιβάλλοντα πλούσια σε οξυγόνο ή χώροι στους οποίους γίνεται χειρισμός εύφλεκτων αναισθητικών).


 Οι μπαταρίες του ακουστικού βαρηκοΐας είναι τοξικές σε περίπτωση κατάποσης! Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση ή κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης των μπαταριών, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό!


 Αν αισθανθείτε πόνο μέσα ή πίσω από το αυτί, αν εμφανιστεί φλεγμονή ή ερεθισμός του δέρματος και ταχεία συσώρευση υπολειμμάτων κυψελίδας αυτιού, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθητιστή ή τον ιατρό σας.

 Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού σωλήνα από το αυτί. Στην απίθανη περίπτωση ενσφήνωσης της θηλής στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ιατρό για την ασφαλή αφαίρεση της θηλής.

 Τα ακουστικά προγράμματα στη λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου μειώνουν τους περιβαλλοντικούς ήχους. Λάβετε υπόψη ότι τα προειδοποιητικά σήματα ή οι ήχοι που προέρχο-

νται από πηγή που βρίσκεται πίσω από το χρήστη, π.χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται πλήρως ή εν μέρει.

 Το συγκεκριμένο ακουστικό βαρηκοΐας δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών. Περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό σε περίπτωση κατάποσης από παιδιά. Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση ή κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό ή μεταβείτε σε νοσοκομείο.

 Μην συνδέετε ενσύρματα το ακουστικό βαρηκοΐας σας σε οποιαδήποτε εξωτερική πηγή ήχου, όπως ραδιόφωνο κ.λπ.



Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό (ηλεκτροπληξία).



Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για άτομα με ενεργές εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες, απινιδωτές κ.λπ.):

- Διατηρείτε το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα. Αν προκύψουν παρεμβολές, μην χρησιμοποιείτε τα ασύρματα ακουστικά βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ενεργού εμφυτεύματος. Λάβετε υπόψη ότι παρεμβολές ενδέχεται επίσης να προκαλούνται από γραμμές τροφοδοσίας, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, ανιχνευτές μετάλλων σε αεροδρόμια κ.λπ.
- Τυχόν μαγνήτες (π.χ. εργαλείο για μπαταρίες, μαγνήτης

EasyPhone κ.λπ.) πρέπει να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα.



Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να τοποθετούνται με θηλές/συστήματα προστασίας από κυψελίδα όταν χρησιμοποιούνται από πελάτες με διάτρηση τυμπάνου, φλεγμονή του ακουστικού πόρου ή άλλως εκτεθειμένη κοιλότητα του μέσου ωτός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούμε τη χρήση ενός προσαρμοσμένου εκμαγείου. Στην απίθανη περίπτωση παραμονής οποιουδήποτε μέρους αυτού του προϊόντος στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ειδικό ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή του.

## 19.2 Πληροφορίες για την ασφάλεια του προϊόντος

- ❶ Τα ακουστικά βαρηκοΐας της Phonak είναι ανθεκτικά στο νερό αλλά δεν είναι αδιάβροχα. Είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν την καταπόνηση που προκαλείται κατά τις τυπικές δραστηριότητες και την περιστασιακή, ακούσια έκθεση σε ακραίες συνθήκες. Μην βυθίζετε ποτέ το ακουστικό βαρηκοΐας σε νερό! Τα ακουστικά βαρηκοΐας της Phonak δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για τακτική εμβάπτιση σε νερό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως κατά την κολύμβηση ή όταν κάνετε μπάνιο. Αφαιρείτε πάντα το ακουστικό βαρηκοΐας πριν από αυτές τις δραστηριότητες, καθώς το ακουστικό περιλαμβάνει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- ❷ Μην πλένετε ποτέ τις εισόδους του μικροφώνου. Μπορεί να χάσει τις ειδικές ακουστικές του ιδιότητες.
- ❸ Προστατεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας από τη θερμότητα (μην το αφήνετε ποτέ κοντά σε παράθυρο ή στο αυτοκίνητο). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές θέρμανσης για να στεγνώσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Για τις ενδεδειγμένες μεθόδους αφύγρανσης, ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας.

**i** Η θηλή θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις μήνες ή όταν γίνεται άκαμπτη ή εύθρυπτη. Με τον τρόπο αυτόν προλαμβάνεται η απόσπαση της θηλής από το στέλεχος του σωλήνα κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση από το αυτί.

**i** Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, αφήνετε το καπάκι της μπαταριοθήκης ανοικτό, ώστε να εξατμίζεται τυχόν υγρασία. Πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας σε ασφαλές, στεγνό και καθαρό μέρος.

**i** Προφυλάσσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας από πτώσεις! Σε περίπτωση πτώσης σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.

**i** Χρησιμοποιείτε πάντα καινούριες μπαταρίες για το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Σε περίπτωση που μια μπαταρία εμφανίσει διαρροή, αντικαταστήστε την αμέσως με μια καινούργια για την αποφυγή ερεθισμού του δέρματος. Μπορείτε να επιστρέψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον ακοοπροθετιστή σας.

**i** Η τάση των μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,5 Volt. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αργύρου-ψευδαργύρου ή μπαταρίες Li-ion (ιόντων λιθίου), καθώς οι μπαταρίες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Ο πίνακας στο κεφάλαιο 5 εξηγεί ακριβώς ποιος τύπος μπαταρίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα συγκεκριμένα ακουστικά βαρηκοΐας σας.

**i** Αφαιρείτε την μπαταρία, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

**i** Η λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας μπορεί να επηρεαστεί από ειδικές ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ακτινοβολία, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αφαιρείτε και φυλάσσετε τα εκτός της αίθουσας/ του χώρου εξέτασης, πριν υποβληθείτε σε:

- Ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις με ακτίνες X (και σαρώσεις CT).

- Ιατρικές εξετάσεις με σαρώσεις MRI/NMRI, κατά τις οποίες δημιουργούνται μαγνητικά πεδία. Κατά τη διέλευση από πύλες ασφαλείας (σε αεροδρόμια κ.λπ.) δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Ακόμη και αν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ, εφαρμόζεται εξαιρετικά χαμηλή δόση που δεν επηρεάζει τα ακουστικά βαρηκοΐας.

**i** Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

---

## Σημειώσεις

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## Κατασκευαστής:

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Ελβετία

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

Ο ακοοπροθετιστής σας:



CE  
0459

